Rozpustné bieliace pásiky – NÁVOD NA POUŽITIE

6 % PEROXIDU VODÍKA

Rozpustné bieliace pásiky s mätovou príchuťou a pokročilým zložením šetrným k zubnej sklovine. Ideálne na rýchle rozjasnenie a priebežné udržiavanie žiarivého úsmevu. S krátkym časom aplikácie a bez potreby následného odstraňovania pásikov.


OBSAHUJE:
14× aplikácií (28 pásikov)

NÁVOD NA POUŽITIE
Ďalšie pokyny a videá o správnej aplikácii bieliacich pásikov nájdete na webovej stránke: https://whitewashlaboratories.com/how-it-works/

Používajte raz alebo dvakrát denne (ráno a večer) podľa nasledujúcich jednoduchých krokov:

1. Navlhčite si zuby jazykom. Priložte jeden pásik (ľubovoľnou stranou) na dolné zuby. Vyhnite sa línii ďasien.
2. Prehnite prečnievajúcu časť pásika za zuby. Pásik priľne k zubom. Postup zopakujte pri horných zuboch.
3. Nechajte pásiky rozpustiť. Mali by sa úplne rozpustiť približne po 20 minútach.

(1. Odlepiť, 2. Aplikovať, 3. Usmiať sa)

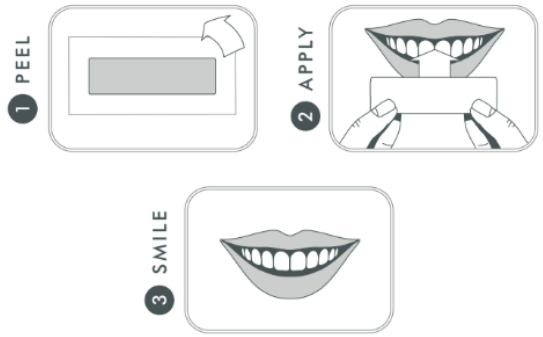

Často kladené otázky (FAQ)

Aká je účinná látka v bieliacich pásikoch a je bezpečná?
Aktívnou bieliacou látkou je 6 % peroxid vodíka, ktorý je bezpečnou zložkou na bielenie zubov a používajú ho zubní lekári na celom svete.

Ovplyvnia pásiky moje zubné náhrady alebo výplne?
Bieliace pásiky bielia **IBA prirodzené zuby**. Neovplyvňujú korunky, mostíky, fazety, výplne (plomby) ani zubné protézy. Nepoužívajte ich na uvoľnené zuby, dočasné výplne ani na

ortodontické aparáty (strojčeky). V prípade akýchkoľvek pochybností sa poraďte so svojím zubným lekárom.

Kedy uvidím výsledky?
Výsledky sa zvyčajne dostavia po 8 až 12 aplikáciách, hoci niektorí ľudia si všimnú rozdiel aj skôr. Na dosiahnutie najlepších výsledkov dokončite celý cyklus. V závislosti od toho, aké biele zuby chcete dosiahnuť, sa môžete rozhodnúť absolvovať viac cyklov.

Môžu sa bieliace pásiky dostať do kontaktu s ďasnami?
Áno, kontakt s ďasnami by sa však mal minimalizovať, aby sa predišlo ich podráždeniu.

Po bielení sa mi niekedy na zuboch objavia biele škvrny. Mám sa obávať?
Nie. Tieto biele škvrny sú dočasné, nie sú škodlivé a zmiznú do 24 hodín.

Mám si zuby vyčistiť pred použitím pásikov alebo až po ňom?
Pri aplikácii bieliacich pásikov by mali byť vaše zuby čisté. Pásiky však nepoužívajte bezprostredne po vyčistení zubov zubnou pastou. Po bielení si vypláchnite ústa vodou a zvyšky bieliaceho gélu odstráňte pomocou papierovej vreckovky. S čistením zubov kefkou počkajte aspoň 30 minút.

Môžem počas používania bieliacich pásikov prehĺtať sliny?
Áno, môžete. Prehĺtanie slín počas používania našich rozpustných bieliacich pásikov je úplne bezpečné.

Čo ak zaznamenám citlivosť zubov alebo podráždenie ďasien?
Počas bielenia zubov nie je nezvyčajné zaznamenať citlivosť zubov a/alebo podráždenie ďasien. Ak k tomu dôjde, ide o dočasný stav, ktorý **nie je škodlivý**. Na zmiernenie príznakov znížte frekvenciu aplikácií alebo bielenie prerušte, kým citlivosť či podráždenie neustúpi. Ak problémy pretrvávajú, prestaňte výrobok používať a poraďte sa so svojím zubným lekárom.

Udržiavanie bieleho úsmevu

Rovnako ako pri všetkých bieliacich procedúrach bude potrebné bielenie v budúcnosti opakovať, aby ste si zachovali biely úsmev. Opakovacie kúry môžete absolvovať každých 12 mesiacov. Prípadne môžete používať 4 až 6 aplikácií mesačne na priebežné udržiavanie belosti zubov.
Používajte v kombinácii s ďalšími produktmi WhiteWash, ktoré vám pomôžu zachovať si biely úsmev.